

WIR BEWEGEN MENSCHEN

Patientenumlagerung vom Experten –
Damit Ihr Rücken es leichter hat.



Seit 30 Jahren für eine heile Welt

Bereits vor 30 Jahren haben wir erfolgreich Rollboards auf dem nationalen und internationalen Markt eingeführt und können bis heute durch unsere langjährige Erfahrung und unseren Mut zur kontinuierlichen Innovation überzeugen.

Bei der Entwicklung und Auswahl unserer Produkte liegt unser Fokus auf höchster Qualität in der Hygiene, Sicherheit und Anwendung für Patient und Pflegepersonal.

Unser Know-How macht den Unterschied

Unsere intelligenten Lösungen zur liegenden oder sitzenden Umlagerung sowie spezielle Hilfsmittel unterstützen Pflegekräfte in Kliniken, Radiologien, in der Senioren- und Behindertenbetreuung sowie die Einsatzkräfte im Rettungswesen.

Mit einfacher Handhabung, rückschonendem Arbeiten und optimalem Patientenkomfort erleichtern unsere Transaroll Boards und Rutschbretter Ihren Alltag in der Pflege.

Wir helfen Ihnen Anderen zu helfen

Ihre Patienten vertrauen Ihnen. Deshalb brauchen Sie einen Partner, dem Sie vertrauen können. Mit uns haben Sie einen Partner, der Sie in den Bereichen Medizinbedarf und Pflege professionell unterstützt und der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die bestmögliche Versorgung für Ihre Patienten sicherzustellen.

Kompetente Unterstützung und Beratung erfahren Sie bei der Auswahl der für Sie passenden Produkte durch unsere qualifizierten Medizinprodukteberater. Ob innovative Entwicklungen, Messeneuheiten oder bewährte Produkte, unser Team findet mit Sicherheit die passende Lösung für Ihr Anliegen.

Unsere eigene Produktion ermöglicht uns zudem, Ihre individuellen Wünsche umzusetzen – sprechen Sie uns gerne an.

Für uns ist Qualität keine Option, sondern unsere Priorität

Als Hersteller und Vertreiber von Medizinprodukten sind wir nach der DIN EN ISO 9001:2015 sowie der DIN EN ISO 13485:2016 geprüft und zertifiziert. Selbstverständlich haben unsere Medizinprodukte das relevante Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen und tragen damit das CE-Kennzeichen.

Unsere Vertriebswege – für mehr als 73.000 Kunden in über 30 Ländern weltweit



Direktvertrieb an Kliniken,
Sanitätshäuser, Apotheken,
Pflegeheime, etc.



Nationales und internationales
B2B Geschäft



Deutschlandweiter
Außendienstesinsatz



Online-Shop
www.transatlantic.de

	Silver Seite 3	Hygiene Seite 4	Blue Seite 4	Professional Seite 5	Smart Seite 6	Klipp- Klapp Seite 6
Größen	3	3	6	4	2	1
Enden	Integrierte Tragegriffe	Integrierte Tragegriffe	Integrierte Tragegriffe	Plastik- Endleiste mit Schlaufen	Plastik- Griffleiste	Ohne
Belastung	350 kg	200 kg	200 kg	200 kg	180 kg	150 kg
Röntgenfähig	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Haltbarkeit	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★	★★	★★
Gleitfähigkeit	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★
Einsatzmöglichkeiten	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★
Hygiene	★★★★★	★★★★★	★★★	★★	★★	★★★★★
	#1	#2	#3	#4	#5	#6

Weitere Informationen zu den erhältlichen Varianten finden Sie bei den einzelnen Produktinformationen oder auf unserer Website www.transatlantic.de

Standard, Mini, Ambu, Long, Special, Slim – was bedeutet was?

Standard, Mini, Ambu, Long, Special und Slim sind die Größeneinheiten unserer Rollboards.

Bitte beachten Sie, dass die Größen aller Rollboards um $\pm 3\%$ abweichen können.

- **Standard:** ca. 180 x 50 cm. Unsere gängigste Größe, da die Boards in allen Bereichen eingesetzt werden können.
- **Mini:** zwischen 95-82 x 50 cm. Die Boards werden primär in der Gynäkologie und Proktologie eingesetzt, da es eine Umlagerung ermöglicht auch wenn die Beine hochgelagert sind.
- **Ambu:** zwischen 86-75 x 45-40 cm. Sie sind durch ihre schmale Größe besonders für kurze Distanzen und Transfers wie zum Beispiel von schmalen Tragen im Rettungsdienst geeignet. Zudem sind sie sehr platzsparend in der Aufbewahrung und können auch unter einer Trage gelagert werden.
- **Long:** ca. 195 x 50 cm. Sie sind speziell für große Patienten und für Betten ohne störendes Kopf- und Fußteil geeignet.
- **Special:** ca. 150 x 60 cm. Sie eignen sich besonders für Patientenumlagerungen, bei denen eine größere Strecke überbrückt werden muss.
- **Slim:** ca. 120 x 40 cm. Sie eignen sich besonders für die Umlagerung aus der Trage in der Notaufnahme.

Für eine reibungslose Patientenumlagerung müssen die schwersten Punkte des Körpers auf dem Rollboard liegen – die Schultern und das Becken. Daher sind unsere Transaroll Boards in der Größe Standard am gängigsten. Sie sind in allen Bereichen einsetzbar und ermöglichen einen für Patienten und Anwender angenehmen Transfer, da sowohl der Kopf als auch die Fersen auf dem Board liegen. In unserem Portfolio finde Sie aber auch Sonderlösungen für den OP mit Beinhochlagerung (Mini), für die Ambulanz und Notaufnahme (Ambu, Slim) sowie für sehr große oder adipöse Patienten (Long, Special).

Grundsätzlich gilt jedoch, dass vor allem die Breite des Rollboards für seine Einsatzfähigkeit bestimmend ist. Je breiter das Rollboard, desto größere Distanzen können überbrückt werden.

Ob ein Rollboard faltbar ist oder nicht hat keinen Einfluss auf seine Transfereigenschaften. Sie können lediglich platzsparender aufbewahrt werden, beispielsweise in unserer Wandhalterung Organizer (siehe S. 8).



Standard



Mini

TIPP!

Unsere #1

Transaroll Silverboard - Standard

180 x 50 cm, faltbar

Artikel-Nr. 4500030

Transaroll Silverboard - Mini

95 x 50 cm, nicht faltbar

Artikel-Nr. 4500029


95 x 50 cm, faltbar

Artikel-Nr. 4500028


Vorteile im Überblick

- KERN** Starker Grundkörper aus einem Stück Polyethylen
- HÜLLE** Hygienisches, anti-bakterielles Gleittuch
- ENDEN** Integrierte, äußerst stabile Tragegriffe

- Der Standard in allen Anwendungsbereichen
- Vollständig strahlendurchlässig und somit für die Anwendung am MRT geeignet
- Hervorragende Gleitfähigkeit

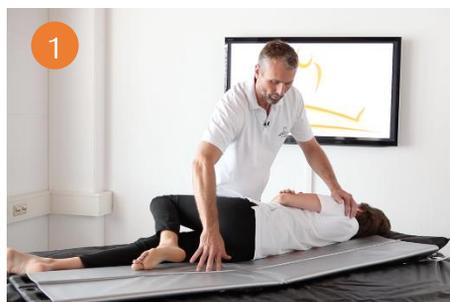


1

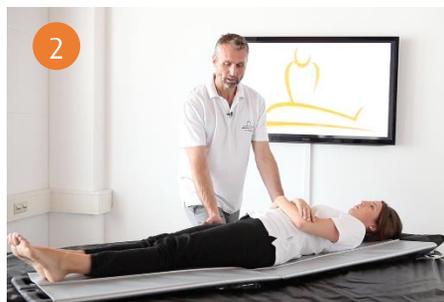

2



3

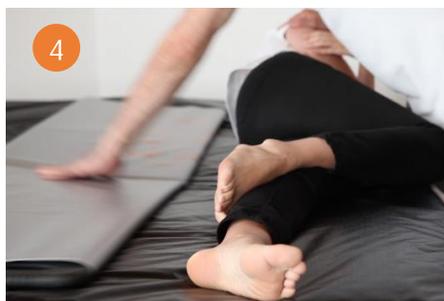

4



Standard

Transaroll Hygieneboard - Standard

180 x 50 cm, faltbar

Artikel-Nr. 4500026

Transaroll Hygieneboard - Mini

95 x 50 cm, nicht faltbar

Artikel-Nr. 4500035

95 x 50 cm, faltbar

Artikel-Nr. 4500036

Vorteile im Überblick

- KERN** Starker Grundkörper aus einem Stück Polyethylen
- HÜLLE** Äußerst hygienische Einmal-Gleitfolie
- ENDEN** Integrierte, äußerst stabile Tragegriffe

- Die Zukunft des Transfers in hygienisch sensiblen Bereichen
- Einfachere Handhabung in Kombination mit dem Organizer (siehe S. 8)
- Set bestehend aus Grundkörper und Gleitfolie (siehe S. 7)

Transaroll Blueboard - Standard

180 x 50 cm, faltbar

Artikel-Nr. 4501100

Transaroll Blueboard - Mini

95 x 50 cm, nicht faltbar

Artikel-Nr. 4500400

95 x 50 cm, faltbar

Artikel-Nr. 4500403

Transaroll Blueboard - Long

195 x 50 cm, faltbar

Artikel-Nr. 4500406

Transaroll Blueboard - Special

150 x 60 cm, nicht faltbar

Artikel-Nr. 4500405

150 x 60 cm, faltbar

Artikel-Nr. 4500404

Vorteile im Überblick

- KERN** Starker Grundkörper aus einem Stück Polyethylen
- HÜLLE** Ripstop Nylon
- ENDEN** Integrierte, äußerst stabile Tragegriffe

- Große Auswahl an verschiedenen Größen
- Vollständig strahlendurchlässig und somit für die Anwendung am MRT geeignet
- Bezug maschinenwaschbar



Standard

Mini

Transaroll Professionalboard - Standard

180 x 50 cm, faltbar

Artikel-Nr. 4401100

Transaroll Professionalboard- Mini

82 x 50 cm, nicht faltbar

Artikel-Nr. 4400400

Transaroll Professionalboard - Ambu

80 x 40 cm, nicht faltbar

Artikel-Nr. 4400114

Transaroll Professionalboard - Slim


120 x 40 cm, nicht faltbar

Artikel-Nr. 4400420

Vorteile im Überblick

KERN	Spezial Leichtschaumstoff
HÜLLE	Hygienisches, anti-bakterielles Gleittuch
ENDEN	Plastik Endleiste mit Schlaufen

- Der Klassiker - bewährt seit über 30 Jahren
- Schlaufen für eine einfache Aufbewahrung
- Für viele Bereiche einsetzbar

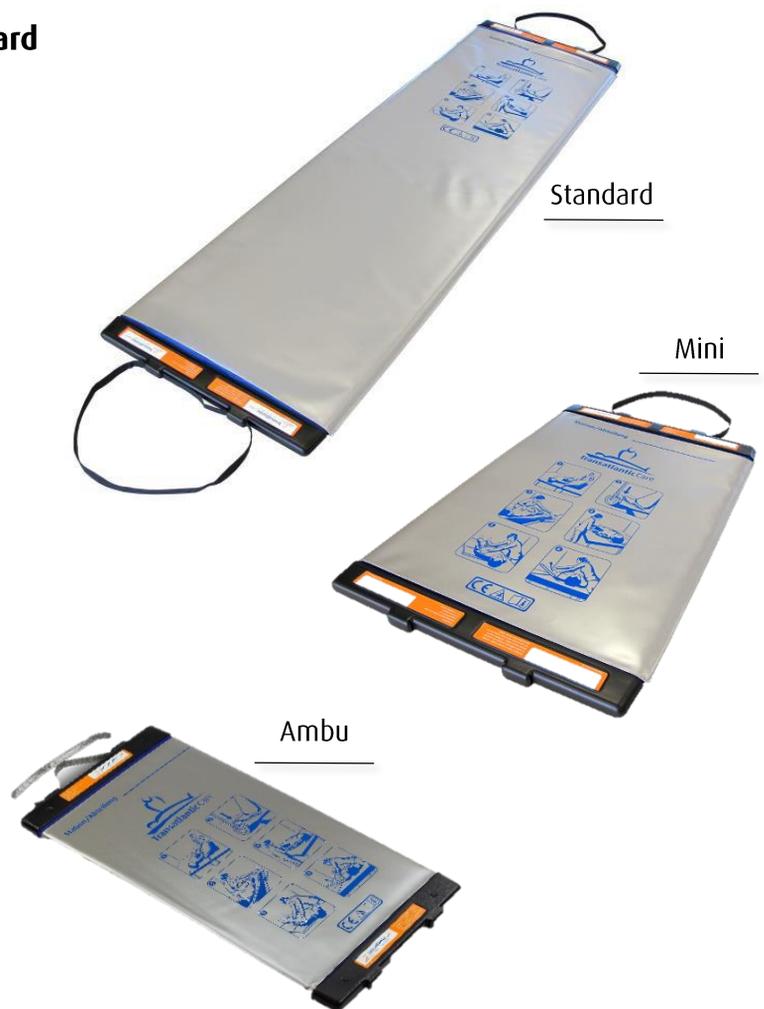

Standard

Mini

Ambu

Warum ein Rollboard?

Im Bereich der Hilfsmittel zur liegenden Umlagerung gibt es ein großes Sortiment an verschiedenen Produkten. So gibt es beispielsweise Rolltücher oder aufblasbare Luftmatratzen mit Gleitfunktion. Vor über 30 Jahren wurden zudem Rollboards auf dem deutschen und internationalen Markt eingeführt. Diese bestehen aus einem Grundkörper und einem endlos Rolltuch. Verschiedene Hersteller verwenden hierfür verschiedene Materialien, weshalb es zu Qualitätsunterschieden zwischen den einzelnen Produkten kommen kann.

Bisherige Studien haben bereits bewiesen, dass im Vergleich zu Tüchern oder Luftmatratzen mit Gleitfunktion, Rollboards jenes Hilfsmittel sind, welche am wenigsten Kräfte auf den (unteren) Rücken, die Wirbelsäule und die Schultern der Pflegekräfte auswirken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Kern des Rollboards einen steifen Untergrund für den Patienten bietet und dieser mit Hilfe des Rolltuchs über den Grundkörper gleitet. So wird der Reibungswiderstand beim Transfer bedeutend verringert.

3 gute Gründe

- Rückenschonend
Gesundes Pflegepersonal
- Ökonomisch
Bis zu >1000 Anwendungen*
- Arbeitserleichternd
Mehr Zeit für den Patienten

So können bei Pflegekräften häufig auftretende Muskel-Skelett-Erkrankungen präventiv vorgebeugt werden. Muskel-Skelett-Erkrankungen stellen dabei nicht nur gesundheitliche Probleme dar, sondern haben auch eine sozialpolitische Bedeutung. Die durch Muskel-Skelett-Erkrankungen herbeigeführten Arbeitsunfähigkeiten und Frühverrentung sind extrem häufig und kostenintensiv. Somit ist eine betriebliche Prävention dringend erforderlich. Für den Bereich der Pflegeberufe, seien es in der häuslichen oder stationären Pflege, bedeutet dies, dass die Arbeit durch spezielle Hilfsmittel, wie mit einem Rollboard, erleichtert werden kann und muss. ⁵

*Abhängig von Modell und Pflege des Rollboards

Standard



Ambu



Transaroll Smartboard- Standard

180 x 50 cm, faltbar

Artikel-Nr. 4400102

Transaroll Smartboard - Ambu

86 x 40 cm, faltbar

Artikel-Nr. 4400101

Vorteile im Überblick

KERN	Platte eingeschweißt in Polyestergerewebe
HÜLLE	Hybridbezug aus Nylon
ENDEN	Plastikgriffleiste

- Das Smartboard Ambu hat eine spezielle 1/3 Faltung, so ist es im gefalteten Zustand 46 / 40 x 40 cm groß
- Keine Schrauben oder metallischen Teile
- Leicht zu reinigen, da die Hüllen vollständig entfernt werden können

NEU

Transaroll Klipp-Klapp-Board - Ambu

75 x 45 cm, 2-fach faltbar


Artikel-Nr. 4400103

Vorteile im Überblick

KERN	HDPE Board
HÜLLE	Graues Gleittuch
ENDEN	Ohne Griffe

- Das Rollboard für jeden Rettungswagen
- Äußerst platzsparend - zusammengeklappt nur 2 cm dünn
- Einfache und sichere Patientenumlagerung auch auf kleinstem Raum

Ambu

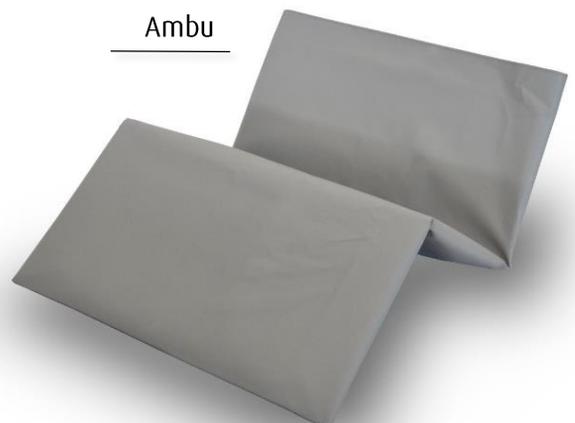



Einweg Gleitfolie - Standard

180 x 53 cm, 60 St./Rolle, perforiert

Artikel-Nr. 4400204

Einweg Gleitfolie – am Stück

10.000 x 60 cm, auf Rolle, nicht perforiert

Artikel-Nr. 4400200

10.000 x 60 cm, in der Spenderbox, nicht perforiert

Artikel-Nr. 4400203

Vorteile im Überblick

- Gleitfolie für das Transaroll Hygieneboard und alle Transaroll Boards bis zu einer Breite von 50 cm
- Einmal-Produkt
- Für einen äußerst hygienischen Einsatz in sensiblen Anwendungsbereichen, wie beispielsweise dem OP

Einweg Schutzfolie - Standard

195 x 56 cm, 100 St./Rolle, perforiert

Artikel-Nr. 4500125N

195 x 60 cm, 50 St./Box, einzeln gefaltet

Artikel-Nr. 4500120

Einweg Schutzfolie - Mini

100 x 54 cm, 150 St./Rolle, perforiert

Artikel-Nr. 4500126

Vorteile im Überblick

- Schutzfolie für alle Transaroll Boards bis zu einer Breite von 50 cm
- Einmal-Produkt
- Ermöglicht einen schnellen und hygienischen Einsatz des Rollboards
- Passend für den Organizer für eine schnelle Anwendung





Organizer

Aufbewahrung für Rollboard und Folie
Artikel-Nr. 4500417

Vorteile im Überblick

- Praktische Aufbewahrung mit integrierter Wandhalterung für alle Transaroll Boards mit einer Länge von bis zu 100 cm (gefaltet)
- Mit Aufbewahrung für die Einmal-Schutzfolie und -Gleitfolie für eine schnelle Anwendung

Schutztasche

Für das Rollboard, grau
Artikel-Nr. 4500117

Vorteile im Überblick

- Sicherer Transport und Aufbewahrung des Rollboards
- Mit drei Sicherheitsverschlüssen
- Breiter Tragegurt zur Entlastung der Schultern und des Rückens



SPEZIELLE HILFSMITTEL



XXL-Tragetuch

107 x 210 cm
Artikel-Nr. 4700081


Vorteile im Überblick

- Tragfähigkeit von 450 kg
- Reißfeste Handgriffe
- Nimmt bis zu 3,8 l Flüssigkeit auf
- Ideal für schwergewichtige Patienten
- Einmal-Produkt
- Findet in verschiedenen Bereichen Anwendung



Sit-On Gleittuch

Artikel-Nr. 4410521

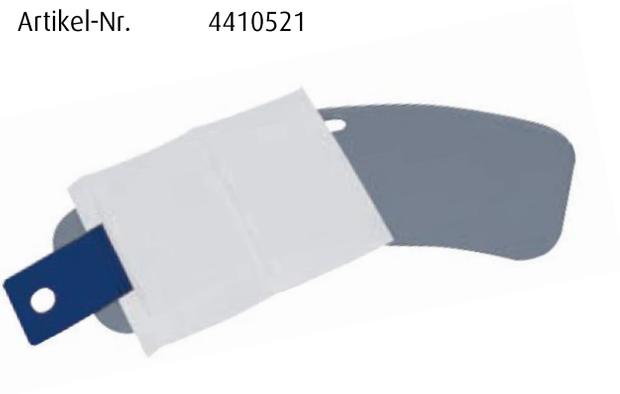

Silber Gleiter M

68 cm

Artikel-Nr. 4500414

Silber Gleiter L

85 cm

Artikel-Nr. 4500415

Vorteile im Überblick

- Belastbar bis 180 kg
- Äußerst hygienisch durch eine glatte Rutschfläche
- Mit allen gängigen Reinigungsmitteln leicht desinfizierbar
- Einfacher Transfer zwischen Rollstuhl – Auto – Bett
- Dezent und unauffälligeres Design
- Kaum sichtbare, sehr strapazierfähige Anti-Rutsch-Auflagen
- Sehr gute Handhabung durch größeren Haltegriff

MEIN **HOLTZ**

Das Rutschbrett



*Nachhaltig,
Modern,
Praktisch.*

Ein schönes Rutschbrett für den Alltag.

Mehr entdecken auf
www.meinholtz.de



TIPP!

Röntgenmatte - breit

190 x 85 cm, blau

Artikel-Nr. 4500019

Röntgenmatte - schmal

190 x 60 cm, blau

Artikel-Nr. 4500020

Vorteile im Überblick

- Gleitfähig für eine einfache Positionierung
- Durchgehende Griffleisten auf beiden Seiten
- Rückenschonende Anwendung
- Maximaler Patientenkomfort
- Vollständig strahlendurchlässig
- Wasserundurchlässig
- Latexfrei

Röntgenraupe und Schutzfolie - Set

2x Röntgenraupe (54 x 42 cm)

1x Schutzfolie mit 100 St. (80 x 45 cm)

Artikel-Nr. 4500011

Vorteile im Überblick

- Für den Gebrauch mit Röntgenkassetten geeignet
- Selbstgleitende Röntgenraupe
- Einfaches Unterschieben der Röntgenkassette unter den Patienten
- Hygienische Einwegfolie für die Röntgenkassette
- Latexfrei



Mehr Informationen zu diesen und weiteren Artikeln für die Radiologie finden Sie auf www.transatlantic.de/radiologiebedarf

Vertrauen Sie auf mehr als



30 Jahre Erfahrung



40.000 verkaufte Rollboards



20.000.000 bewegte Menschen

MADE IN GERMANY



Transatlantic Handelsgesellschaft Stolpe & Co. mbH
Siemensstraße 21-23 | 61267 Neu-Anspach
Tel.: +49 (0)6081 9430-50 | Fax: +49 (0)6081 9430-80
info@transat.de | www.transatlantic.de

 **Transatlantic**
Produkte für eine heile Welt